

Manual de instrucciones

Balanzas de precisión/ compactas y de plataforma

KERN 572/573/KB/DS/FKB/FCB/PCB

Versión 5.3
01/2008
E





KERN 572/573/KB/DS/FKB/FCB/PCB

Versión 5.3 01/2008

Manual de instrucciones


Balanzas de precisión/ compactas y de plataforma

Índice

1	MODE – MENU	4
2	Datos técnicos	5
2.1	KERN 572	5
2.2	KERN 573	7
2.3	KERN KB	8
2.4	KERN FKB	9
2.5	KERN DS	10
2.6	KERN PCB	12
2.7	KERN FCB	13
3	Indicaciones fundamentales (Generalidades)	14
3.1	Uso apropiado	14
3.2	Uso inapropiado	14
3.3	Garantía	14
3.4	Control de medios de ensayo	14
4	Indicaciones fundamentales de seguridad	15
4.1	Observar las instrucciones de servicio	15
4.2	Formación del personal	15
5	Transporte y almacenamiento	15
5.1	Control en el momento de entrega del aparato	15
5.2	Embalaje	15
6	Desembalaje, emplazamiento y puesta en marcha	15
6.1	Lugar de emplazamiento, lugar de uso	15
6.2	Desembalaje	16
6.2.1	Emplazamiento	16
6.3	Conexión a la red	16
6.4	Conexión de equipo periférico	16
6.5	Puesta en marcha inicial	16
6.6	Ajuste	16
6.7	Ajustar (ver capítulo 7.2.6)	16
6.7.1	Ajuste para la verificación (KERN 573)	17
6.8	Verificación	17
7	Funcionamiento	18

7.1	Teclado e indicaciones en el display	18
7.2	Manejo	19
7.2.1	Pesaje con TARA	19
7.2.2	Seleccionar número de piezas de referencia	19
7.2.3	Tanto por ciento (%)	19
7.2.4	Peso neto total	19
7.2.5	Pesaje de Tolerancia	19
7.2.6	Ajuste	21
7.2.7	Preselección de Tara	21
7.2.8	Función Auto Tare	21
7.2.9	Velocidad / filtro	21
7.2.10	Auto Off	21
7.2.11	Factor variable	21
7.2.12	Preselección	21
7.2.13	Iluminación del fondo de la indicación	23
7.3	Interface de datos RS 232 C	23
7.4	Distribución de datos a través del Interface RS 232 C	24
7.4.1	Hay 4 clases de distribución de datos a través del RS 232 C	24
7.4.2	Descripción del transferidor de datos	24
7.4.3	Numerador	24
7.5	Impresora para el valor registrado	25
7.6	Pesaje sumergido	25
8	Mantenimiento, conservación, eliminación	26
8.1	Limpieza	26
8.2	Mantenimiento, conservación	26
8.3	Eliminación	26
9	Pequeño servicio de auxilio	26
10	Declaración de conformidad	27

1 MODE – MENU

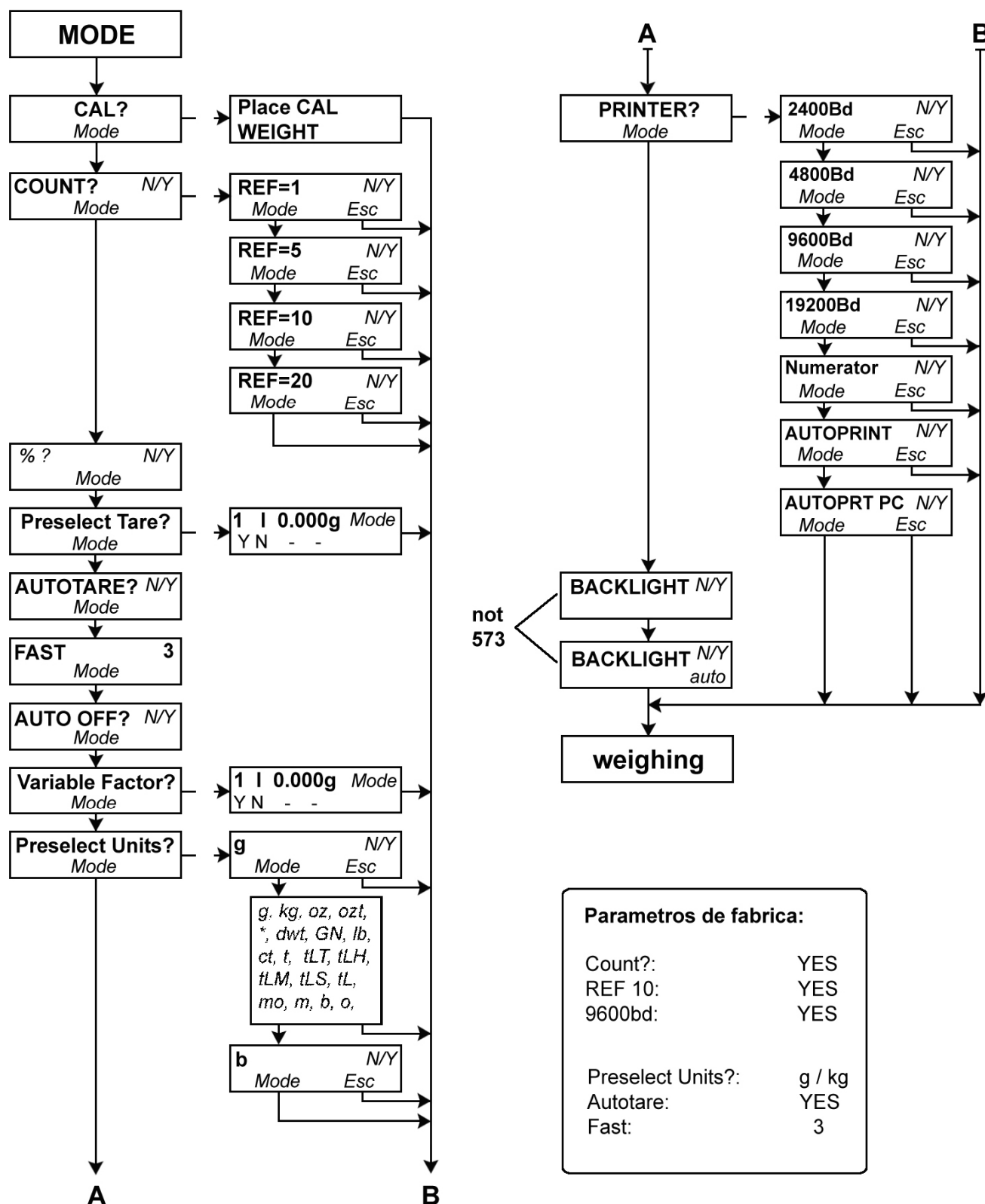

2 Datos técnicos

2.1 KERN 572

KERN	572-30	572-31	572-32	572-33	572-35
<i>Lectura (d)</i>	0,001 g	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g
<i>Gama de pesaje (max)</i>	161 g	241 g	301 g	1.610 g	2.410 g
<i>Gama de taraje (substractivo)</i>	161 g	241 g	301 g	1.610 g	2.410 g
<i>Reproducibilidad</i>	0,001 g	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g
<i>Linearidad</i>	±0,003 g	±0,003 g	±0,003 g	±0,03 g	±0,03 g
<i>Peso mínimo por unidad</i>	0,001 g	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g
<i>Peso de ajuste F1 recomendado (no adjunto)</i>	100 g + 50 g	200 g	200 g + 100 g	1 kg + 500 g	2 kg
<i>Humedad del aire</i>	max. 80% rel. (no condensado)				
<i>Verificable</i>	no	no	no	no	no
<i>Tiempo de estabilización (típico)</i>	3 sec.				
<i>Temperatura ambiente admitida</i>	+10 °C ... + 40 °C				
<i>Carcasa (A x p x a) mm</i>	180 x 310 x 90				
<i>Filtro de vibración</i>	sí				
<i>Platillo de pesaje mm</i>	Ø 106	Ø 106	Ø 106	Ø 150	Ø 150
<i>Unidades</i>	ver menú				
<i>Peso kg (neto)</i>	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<i>Interface de datos</i>	sí (RS232)				

KERN	572-37	572-45	572-49	572-57
<i>Lectura (d)</i>	0,01 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g
<i>Gama de pesaje (max)</i>	3.010 g	12.100 g	16.100 g	24.100 g
<i>Gama de taraje (substractivo)</i>	3.010 g	12.100 g	16.100 g	24.100 g
<i>Reproducibilidad</i>	0,01 g	0,05 g	0,1 g	0,1g
<i>Linearidad</i>	±0,03 g	±0,15 g	±0,3 g	± 0,3 g
<i>Peso mínimo por unidad</i>	0,01 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g
<i>Peso de ajuste F1 recomendado (no adjunto)</i>	2 kg + 1 kg	10 kg	10 kg + 5 kg	20 kg
<i>Humedad del aire</i>	max. 80% rel. (no condensado)			
<i>Verificable</i>	no	no	no	no
<i>Tiempo de estabilización (típico)</i>	3 sec.			
<i>Temperatura ambiente admitida</i>	+10 °C ... + 40 °C			
<i>Carcasa (A x p x a) mm</i>	180 x 310 x 90			
<i>Filtro de vibración</i>	sí			
<i>Platillo de pesaje mm</i>	Ø 150	160 x 200	160 x 200	160 x 200
<i>Unidades</i>	ver menú			
<i>Peso kg (neto)</i>	2,3	2,7	2,7	2,7
<i>Interface de datos</i>	sí (RS232)			

2.2 KERN 573

KERN	573-46
<i>Clase de exactitud</i>	<i>II</i>
<i>Lectura (d)</i>	<i>0,1 g</i>
<i>Valor de verificación (e)</i>	<i>1g</i>
<i>Gama de pesaje (max)</i>	<i>6.500 g</i>
<i>Carga mínima (Min)</i>	<i>5 g</i>
<i>Gama de taraje (subtractivo)</i>	<i>6.500 g</i>
<i>Reproducibilidad</i>	<i>0,1 g</i>
<i>Linealidad</i>	<i>±0,2 g</i>
<i>Peso mínimo por unidad</i>	<i>0,3 g</i>
<i>Peso de ajuste F2 recomendado (no adjunto)</i>	<i>5 kg</i>
<i>Valor de verificación</i>	<i>1 g</i>
<i>Humedad del aire</i>	<i>max. 80% rel. (no condensado)</i>
<i>Tiempo de estabilización (típico)</i>	<i>2 sec.</i>
<i>Temperatura ambiental admitida</i>	<i>0° C a 50° C</i>
<i>Gama de temperatura nominal</i>	<i>+10 °C ... + 40 °C</i>
<i>Carcasa (A x p x a) mm</i>	<i>180 x 310 x 90</i>
<i>Unidades</i>	<i>g, kg</i>
<i>Platillo de pesaje mm</i>	<i>160 x 200</i>
<i>Interface de datos</i>	<i>sí (RS232)</i>
<i>Unidades de pesaje</i>	<i>g, kg</i>
<i>Filtro de vibración</i>	<i>sí</i>
<i>Peso kg (neto)</i>	<i>2,7</i>

2.3 KERN KB

KERN	KB 120-3	KB 200-3	KB 1200-2	KB 2000-2	KB 10000-1
Lectura (d)	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g
Gama de pesaje (max)	121 g	201 g	1.210 g	2.010 g	10.100 g
Gama de taraje (substractivo)	121 g	201 g	1210 g	2010 g	10.100 g
Reproducibilidad	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g
Linearidad	±0,003 g	±0,003 g	±0,03 g	±0,03 g	±0,3 g
Peso mínimo por unidad	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g
Peso de ajuste F1 recomendado (no adjunto)	100 g	200 g	1000 g	2000 g	10 kg
Humedad del aire	max. 80% rel. (no condensado)				
Verificable	no				
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.				
Temperatura ambiente admitida	10° C a 40° C				
Carcasa (A x p x a) mm	165 x 230 x 85				
Platillo de pesaje mm	Ø 81	Ø 81	130 x 130		150 x 170
Unidades	ver menú				
Filtro de vibración	sí				
Peso kg (neto)	1,1	1,1	1,2	1,2	1,6
Interface de datos	sí (RS232)				

2.4 KERN FKB

KERN	FKB 8k0.05	FKB 16k0.1	FKB 36k0.2	FKB 65k0.5
<i>Lectura (d)</i>	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
<i>Gama de pesaje (max)</i>	8.100 g	16.100 g	36.100 g	65.100 g
<i>Gama de taraje (substractivo)</i>	8.100 g	16.100 g	36.100 g	65.100 g
<i>Reproducibilidad</i>	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
<i>Linearidad ±</i>	0,15 g	0,3 g	0,6 g	1,5 g
<i>Peso mínimo por unidad</i>	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
<i>Peso de ajuste F1 recomend. (no adjunto)</i>	5 kg + 2 kg	10 kg + 5 kg	20 kg + 10 kg	50 kg
<i>Humedad del aire</i>	max. 80% rel. (no condensado)			
<i>Verificable</i>	no			
<i>Tiempo de estabilización (típico)</i>	3 sec.			
<i>Temperatura ambiente admitida</i>	+ 10 °C ... + 40 °C			
<i>Carcasa (A x p x a) mm</i>	350 x 390 x 120			
<i>Platillo de pesaje acero inoxidable (mm)</i>	340 x 240			
<i>Filtro de vibración</i>	sí			
<i>Peso kg (neto)</i>	6,5			
<i>Interface de datos</i>	sí (RS232)			

2.5 KERN DS

KERN	DS 5K0.05S	DS 8K0.05	DS 10K0.1S	DS 16K0.1	DS 20K0.1
Lectura (d)	0,05 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g
Gama de pesaje (max)	5.100 g	8.100 g	10.100 g	16.100 g	20.100 g
Gama de taraje (substractivo)	5.100 g	8.100 g	10.100 g	16.100 g	20.100 g
Reproducibilidad	0,05 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Linealidad \pm	0,15 g	0,15 g	0,3 g	0,3 g	0,3 g
Peso mínimo por unidad	0,05 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Peso de ajuste F1 recomend. (no adjunto)	5 kg	5 kg + 2 kg	10 kg	10 kg + 5 kg	20 kg
Humedad del aire	max. 80% rel. (no condensado)				
Verificable	no				
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.				
Temperatura ambiente admitida	+ 10 °C ... + 40 °C				
Filtro de vibración	sí				
Carcasa (A x P x a) mm	228 x 228 x 70	315 x 305 x 70	228 x 228 x 70	315x305x70	315x305x70
Platillo de pesaje, acero inoxidable	228x228	315x305	228x228	315x305	315x305
Unidades	ver menú				
Filtro de vibración	sí				
Peso kg (neto)	5,5	7,5	5,5	7,5	7,5
Interface de datos	sí (RS232)				

KERN	DS 36K0.2	DS 36K0.2L	DS 65K0,5	DS 100K0,5	DS 150K1
Lectura (d)	0,2 g	0,2 g	0,5 g	0,5 g	1 g
Gama de pesaje (max)	36.100 g	36.100 g	65.100g	101.000g	151.000g
Gama de taraje (substractivo)	36.100 g	36.100 g	65.100g	101.000g	151.000g
Reproducibilidad	0,2 g	0,2 g	0,5g	0,5 g	1 g
Linealidad ±	0,6 g	0,6 g	1,5 g	1,5 g	3 g
Peso mínimo por unidad	0,2 g	0,2 g	0,5g	0,5 g	1 g
Peso de ajuste F1 recomend. (no adjunto)	20 kg + 10 kg	20 kg + 10 kg	50 kg	50 kg + 50 kg	3 x 50 kg
Humedad del aire	max. 80% rel. (no condensado)				
Verificable	no				
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.				
Temperatura ambiente admitida	+ 10 °C ... + 40 °C				
Filtro de vibración	sí				
Carcasa (A x P x a) mm	315 x 305 x 70	450 x 350 x 115			
Platillo de pesaje, acero inoxidable	315 x 305	450 x 350			
Unidades	ver menú				
Peso kg (neto)	7,5	9,5			
Interface de datos	sí (RS232)				

2.6 KERN PCB

KERN	PCB 200-3B	PCB 240-3B	PCB 2000-2B	PCB 2400-2B	PCB 10K0.05B
<i>Lectura (d)</i>	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,05 g
<i>Gama de pesaje (max)</i>	201 g	241 g	2.010 g	2.410 g	10.100 g
<i>Gama de taraje (substractivo)</i>	201 g	241 g	2010 g	2410 g	10.100 g
<i>Reproducibilidad</i>	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,05 g
<i>Linearidad ±</i>	0,003 g	0,003 g	0,03 g	0,03 g	0,15 g
<i>Peso mínimo por unidad</i>	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,05 g
<i>Peso de ajuste F1 recomend. (no adjunto)</i>	200 g	200 g	2000 g	2000 g	10 kg
<i>Humedad del aire</i>	max. 80% rel. (no condensado)				
<i>Verificable</i>	no				
<i>Tiempo de estabilización (típico)</i>	3 sec.				
<i>Temperatura ambiente admitida</i>	+ 10 °C ... + 40 °C				
<i>Filtro de vibración</i>	sí				
<i>Carcasa (A x P x a) mm</i>	170 x 250 x 85				
<i>Platillo de pesaje, acero inoxidable</i>	Ø 81	Ø 81	130 x 130	130 x 130	150 x 170
<i>Unidades</i>	ver menú				
<i>Filtro de vibración</i>	sí				
<i>Peso kg (neto)</i>	1	1	1,5	1,5	1,7
<i>Interface de datos</i>	sí (RS232)				

2.7 KERN FCB

KERN	FCB 12K0.1B	FCB 24K0.2B
<i>Lectura (d)</i>	0,1 g	0,2 g
<i>Gama de pesaje (max)</i>	12.100 g	24.100 g
<i>Gama de taraje (substractivo)</i>	12.100 g	24.100 g
<i>Reproducibilidad</i>	0,1 g	0,2 g
<i>Linearidad ±</i>	0,3 g	0,6 g
<i>Peso mínimo por unidad</i>	0,1 g	0,2 g
<i>Peso de ajuste F1 recomend. (no adjunto)</i>	10 kg	20 kg
<i>Humedad del aire</i>	max. 80% rel. (no condensado)	
<i>Verificable</i>	no	
<i>Tiempo de estabilización (típico)</i>	3 sec.	
<i>Temperatura ambiente admitida</i>	+ 10 °C ... + 40 °C	
<i>Filtro de vibración</i>	sí	
<i>Carcasa (A x P x a) mm</i>	270 x 350 x 110	
<i>Platillo de pesaje, acero inoxidable</i>	253 x 228	
<i>Unidades</i>	ver menú	
<i>Filtro de vibración</i>	sí	
<i>Peso kg (neto)</i>	3,3	
<i>Interface de datos</i>	sí (RS232)	

3 Indicaciones fundamentales (Generalidades)

¡Leer todas las instrucciones de servicio antes del emplazamiento y la puesta en marcha de la balanza y atenerse a ellas!

3.1 Uso apropiado

La balanza que usted adquirió sirve para determinar el peso de material de pesaje. Esta balanza ha sido diseñada como „balanza no automática“, es decir que el material de pesaje se tiene que colocar de manera manual y cuidadosa en el centro de la placa de pesaje. En cuanto se obtenga un valor de pesaje estable, se puede proceder a leer el valor indicado por la balanza.

3.2 Uso inapropiado

La balanza no se puede utilizar para efectuar pesajes dinámicos. ¡Si se retiran o añaden pequeñas cantidades al material de pesaje, es posible que la balanza indique valores de pesaje equivocados como consecuencia de la función de „compensación de estabilidad“ integrada en el aparato! (Por ejemplo, la salida lenta de un líquido que se encuentre sobre la balanza dentro de un recipiente.)

Evitar que la placa de pesaje esté expuesta a una carga continua. Esto podría dañar el mecanismo medidor de la balanza.

También es sumamente importante evitar que la balanza sea expuesta a golpes y sobrecargas superiores a la carga máxima permisible (Máx.) teniéndose en cuenta una carga de tara eventualmente ya existente. Esto podría averiar la balanza.

Nunca utilizar la balanza en lugares potencialmente explosivos. Los modelos fabricados en serie no están protegidos contra explosión.

No está permitido modificar la construcción de la balanza. Esto podría provocar resultados de pesaje falsos, deficiencias en la seguridad de la balanza o la destrucción de la misma.

La balanza sólo se debe utilizar en conformidad con las especificaciones descritas aquí. Si se desea utilizar la balanza en otros campos de aplicación, se requiere una autorización escrita de parte de la empresa KERN.

3.3 Garantía

El derecho de garantía queda excluido en los siguientes casos:

- Inobservancia de las especificaciones contenidas en estas instrucciones de servicio
- Utilización de la balanza fuera de los campos de aplicación descritos
- Modificación o manipulación (apertura) del aparato
- Daños mecánicos y daños causados por líquidos u otras sustancias
- Desgaste y deterioro natural
- Emplazamiento e instalación eléctrica realizados inadecuadamente
- Sobrecarga del mecanismo medidor

3.4 Control de medios de ensayo

En el marco de aseguramiento de calidad es necesario que se controlen con regularidad las cualidades de medición de la balanza así como la aptitud de una eventual pesa de calibración. El usuario responsable tiene que determinar el intervalo adecuado así como el tipo y las dimensiones de este control. Para más información sobre el control de medios de ensayo de balanzas así como sobre las pesas de calibración requeridas para tal efecto, véase la página web de la empresa KERN (www.kern-sohn.com). En el acreditado laboratorio de calibración DKD de la empresa KERN es posible calibrar balanzas y pesas de calibración de una manera rápida y rentable (aquí se realiza el ajuste a la medida normal válida a nivel nacional).

4 Indicaciones fundamentales de seguridad

4.1 Observar las instrucciones de servicio

Lea las instrucciones de servicio detenidamente antes de proceder con el emplazamiento y la puesta en marcha de la balanza, incluso si ya tiene cierta experiencia con balanzas de la marca KERN.

4.2 Formación del personal

Sólo personal debidamente capacitado debe manejar y cuidar estos aparatos.

5 Transporte y almacenamiento

5.1 Control en el momento de entrega del aparato

Por favor, controlar en el momento de entrega de la balanza si el embalaje o el aparato muestran algún daño externo visible.

En caso de existir daños visibles en la balanza, déjese confirmar la existencia de estos por medio de la firma del portador. No modificar nada en la mercancía ni en el embalaje y no extraer ninguna pieza del envío. Notifique de inmediato y por escrito el daño al servicio postal de paquetes (dentro de 24 horas).

5.2 Embalaje

Guarde todas las partes del embalaje original para el eventual caso de tener que devolver el aparato.

Sólo utilizar el embalaje original para la devolución del aparato. Retire todos los cables conectados así como todas las piezas sueltas o movibles antes de enviar el aparato remueve el platillo.

Vuelva a montar los seguros de transporte. Asegure todas las piezas, como p.ej. la guardabrisa, la placa de pesaje o la fuente de alimentación, contra posibles movimientos y, por consiguiente, contra daños que se puedan producir durante el transporte.

6 Desembalaje, emplazamiento y puesta en marcha

6.1 Lugar de emplazamiento, lugar de uso

La balanza está construida de tal forma que siempre se obtendrá resultados de pesaje fiables, siempre y cuando el pesaje se realice bajo condiciones de uso habituales.

Usted podrá trabajar con rapidez y exactitud si elige el lugar de emplazamiento ideal para su balanza.

Por eso debe observar los siguientes puntos respecto al lugar de emplazamiento:

- Colocar la balanza sobre una superficie sólida y plana
- No colocarla junto a una calefacción así como fluctuación de temperatura por exponerla a la radiación solar para evitar que se caliente demasiado
- Proteger la balanza contra corrientes de aire dejando ventanas y puertas cerradas
- Evitar sacudidas de la balanza durante el proceso de pesaje
- Proteger la balanza contra polvo, vapores y una humedad del aire demasiado alta
- No exponer el aparato a una fuerte humedad por tiempo prolongado. Se pueden formar gotas de rocío (condensación de la humedad del aire en el aparato), cuando se coloque un aparato frío en un entorno mucho más caliente. En este caso hay que dejar que el aparato se aclimatice a la temperatura ambiente durante aprox. unas dos horas sin conectarlo a la red.
- Evitar la carga electrostática del material y del recipiente de pesaje así como de la guardabrisa.

En caso de existir campos electromagnéticos o producirse cargas electrostáticas así como alimentación de corriente inestable pueden haber grandes divergencias en los valores de medición indicados por la balanza (resultados de pesaje falsos). En este caso se tiene que emplazar el aparato en otro lugar.

6.2 Desembalaje

Extraer cuidadosamente la balanza del embalaje, sacar la funda de plástico y colocarla en el lugar previsto.

6.2.1 Emplazamiento

Emplazar la balanza de tal manera que la placa de pesaje se encuentre en una posición exactamente horizontal.

6.3 Conexión a la red

La balanza es alimentada con corriente a través de una fuente de alimentación externa. La tensión especificada en el rótulo de la fuente de alimentación debe coincidir con la tensión proporcionada por la red local. Use exclusivamente fuentes de alimentación originales de KERN. Para el uso de otros modelos se requiere la autorización de parte de la empresa KERN.

6.4 Conexión de equipo periférico

Antes de desconectar o conectar aparatos suplementarios (impresora, ordenador) al interfaz de datos, es necesario separar la balanza de la red eléctrica.

Utilice exclusivamente accesorios y equipo periférico de KERN, ya que éstos están adaptados óptimamente a los requisitos su balanza.

6.5 Puesta en marcha inicial

Un tiempo de calentamiento de aprox. 2 horas después de encender la balanza contribuye a estabilizar los valores de medición.

La precisión de la balanza depende de la aceleración de caída o gravedad existente en ese punto geográfico. Leer obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Ajuste".

6.6 Ajuste

Como la aceleración de la gravedad no es igual en todos los puntos de nuestro planeta, es necesario ajustar la balanza a la aceleración de la gravedad existente en el respectivo lugar de emplazamiento teniendo en consideración el principio físico de pesaje en que se basa la misma (sólo si la balanza aún no ha sido ajustada en fábrica al respectivo lugar de emplazamiento). Este ajuste se tiene que efectuar en la puesta en marcha inicial de la balanza así como después de cada cambio del lugar de emplazamiento y para fluctuaciones de temperatura de los alrededores. Para obtener valores de medición exactos, también se recomienda ajustar la balanza de vez en cuando durante el pesaje.

6.7 Ajustar (ver capítulo 7.2.6)

Con un peso de ajuste se puede revisar la exactitud de la balanza en todo momento y ajustar nuevamente.

Atención:

Las balanzas calibradas no pueden ser ajustadas.

Modo de actuar durante el ajuste:

Debe comprobarse que las condiciones del entorno sean estables. Para la estabilización es conveniente un tiempo de calentamiento corto, de 15 minutos aprox.

6.7.1 Ajuste para la verificación (KERN 573)

Generalidades:

Antes de iniciar el proceso de verificación, la balanza debe ser ajustada.

Advertencia:

El ajuste solo es posible cuando el interruptor de ajuste no se encuentre en posición de bloqueo. El interruptor del ajuste se encuentra al suelo de la carcasa entre los tornillos nivelantes.

Indicador a la derecha	Libre acceso a la función de ajuste.
	Esta regulación debe efectuarse antes de iniciar el proceso de ajuste.
	Instrucciones para el proceso de ajuste véase cap. 7.2 "Manejo".
	Una vez efectuado el ajuste es necesario bloquear la función de ajuste a través de poner el interruptor a la izquierda.
Interruptor a la izquierda	Función de ajuste bloqueada.
	Tras efectuar el ajuste, la función de ajuste debe quedar bloqueada mediante este interruptor.
	La balanza está preparada para iniciar el proceso de verificación.
	Después la verificación el interruptor debe estar protegido con una etiqueta de verificación contra el acceso non-autorizado.

6.8 Verificación

Generalidades:

Según la norma 90/384/CEE de la UE, es necesario verificar las balanzas oficialmente cuando son utilizadas en los siguientes ámbitos de aplicación (ámbitos prescritos por la ley):

- En relaciones comerciales, cuando el precio de una mercancía es determinado mediante pesaje.
- En la producción de medicamentos en farmacias así como para el análisis en laboratorios médicos y farmacéuticos.
- Para fines oficiales
- En la producción de paquetes de productos elaborados
Consulte a la oficina de pesos y medidas local en caso de duda.

Indicaciones de verificación

Todas las balanzas especificadas en los datos técnicos como balanzas verificables disponen de una autorización de tipo de construcción de la UE. Si la balanza es utilizada en uno de los ámbitos arriba mencionados, ésta tiene que haber sido verificada oficialmente y tiene que volver a ser verificada en el futuro en intervalos regulares.

La realización de una nueva verificación depende de las normas legales vigentes en el respectivo país. En Alemania, por ejemplo, la verificación oficial de balanzas por lo general tiene una validez de 2 años. ¡Observar las normas legales vigentes en el país de uso de la balanza!

7 Funcionamiento

7.1 Teclado e indicaciones en el display



Teclado

	ON / OFF
	Imprimir el resultado del pesaje en MODE: No / hacia abajo
	Modo im %- y modo de contaje: Establecer una referencia en MODE: Si / hacia arriba
	MODO de configuración (véase el diagrama estructura de modo, pág. 2)
	Pesaje de cómputo en MODE: hacia la izquierda Comunicación g-pieces
	Conmutación de unidades en MODE: hacia la derecha
	Tarar en MODE: retorno la función de pesaje

Símbolo en el display	Significado
==OVERLOAD==	Sobrecarga: el alcance de pesaje ha sido excedido
= =====	Subcarga: carga es inferior al mínimo alcance de pesaje
<< .	En el modo de contaje y %: pieza demasiado ligera
☐ .	La función "Auto Tare" está activa
PTA .	La función "Preselección de tara" está activa
D .	La diferencia en % durante el pesaje de tantos por ciento
Net .	Peso neto del componente durante el pesaje de cómputo
SUM .	Peso bruto de varios componentes durante el pesaje de cómputo
→ .	La balanza se encuentra en el modo de contaje y momentáneamente está indicando el peso de la cantidad de piezas contadas

7.2 Manejo

7.2.1 PESADA con TARA

Al efectuar una **pesada** se deposita una determinada cantidad de un producto dentro de un recipiente de pesaje, cuyo peso propio (la tara) no es pesado. Gracias a la función de TARA, el peso del recipiente no es considerado, así que sólo es indicado el valor de medición del producto. El máximo alcance de pesaje es reducido por el valor del recipiente tarado – TARA es una función de sustracción. Espere hasta que en el display aparezca el símbolo de unidad g o kg. El resultado del pesaje ahora es estable.

7.2.2 CONTAJE - Seleccionar número de piezas de referencia

Para poder contar una cantidad mayor de piezas, se tiene que determinar el peso medio por pieza con ayuda de una cantidad pequeña (**el número de piezas de referencia**). Mientras más grande el número de piezas de referencia, más exacto es el conteo de las piezas.

En caso de piezas pequeñas o de piezas muy variadas se tiene que emplear un número de piezas de referencia bastante elevado.

CONTAJE

Primero colocar sobre la balanza el número de piezas de referencia arriba determinado.

Gracias a la optimización automática de la referencia (**OPT**), la exactitud de conteo es incrementada automáticamente al colocar un número de hasta 100 piezas sobre la balanza.

Luego colocar la cantidad de piezas que se desee contar.

7.2.3 TANTO POR CIENTO (%)

Con el **pesaje del tanto por ciento** es posible retirar cantidades parciales de un recipiente de pesaje.

La cantidad parcial retirada es indicada primero en %.

En vez de una extracción o toma manual se indica, p. ej., la cantidad de humedad evaporada durante un proceso de secado en %.

Pulsando la tecla REZ, la cantidad restante dentro del recipiente también es indicada en %.






7.2.4 PESO NETO TOTAL

La función de **peso neto total** le permite pesar sucesivamente varios componentes (K1, K2, ..., Kn) para luego determinar el peso total de los componentes.

Para regresar al modo de pesaje pulse la tecla ESC.

7.2.5 PESAJE DE TOLERANCIA

En el **pesaje de tolerancia** las piezas a comprobar son comparadas con un valor teórico y la divergencia respecto a este valor teórico es indicada con signo positivo o negativo.

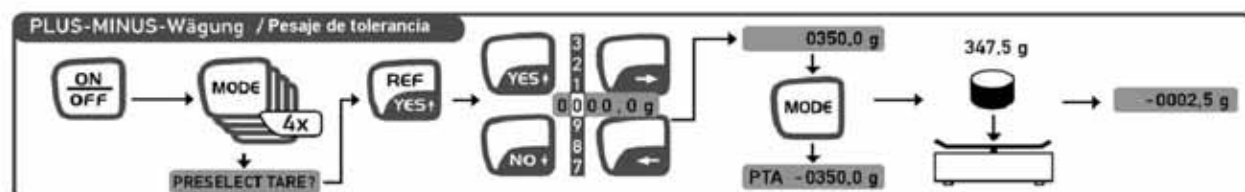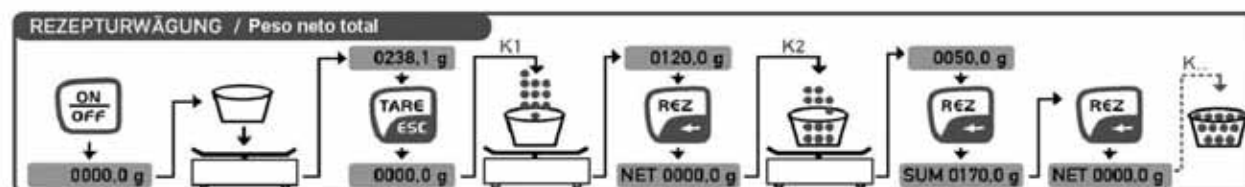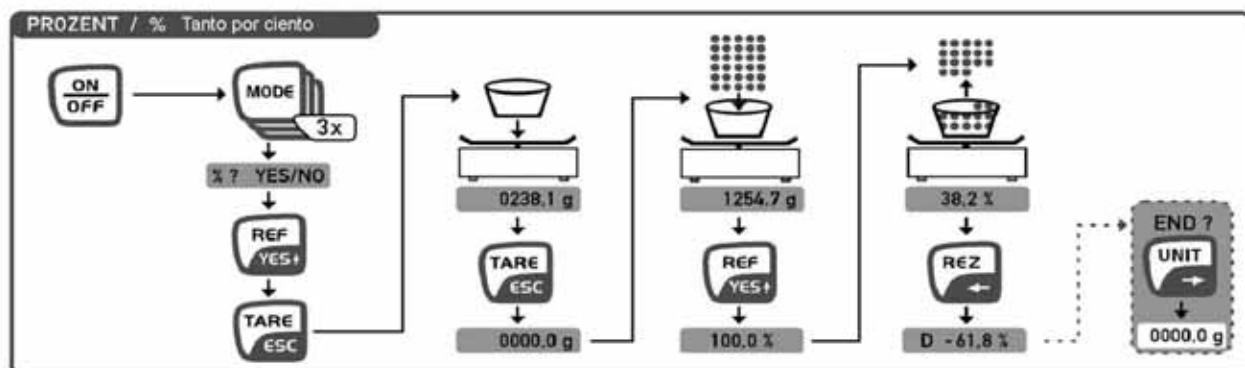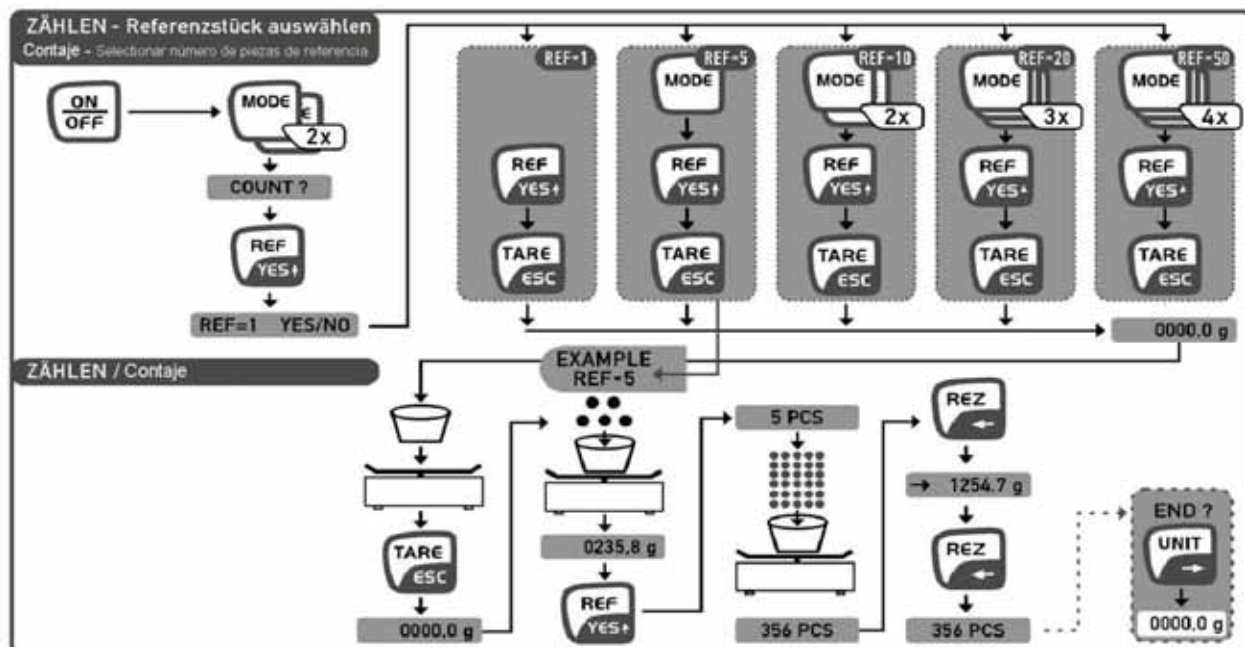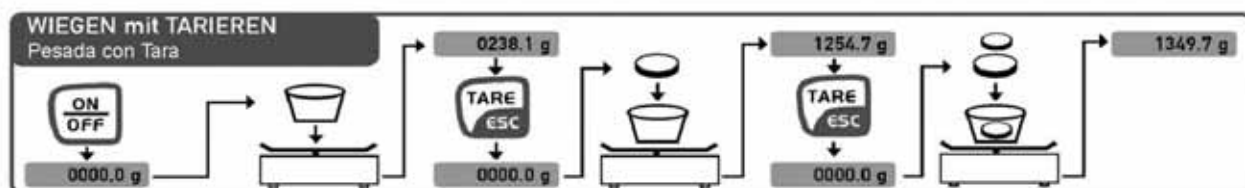

7.2.6 AJUSTE

La balanza se tiene que **ajustar** en el lugar de emplazamiento antes del primer uso así como en intervalos regulares. Por favor, observar el tiempo de calentamiento especificado en el capítulo „Puesta en marcha inicial“. ¡Evitar sacudidas y perturbaciones durante el proceso de ajuste!

7.2.7 PRESELECCION DE TARA

El peso propio conocido de un recipiente de pesaje se puede eliminar/tarar introduciendo su peso con ayuda de la función **preselección de tara** (sustracción del peso). De esta manera en los siguientes pesajes solamente se indicará el peso neto de los bienes pesados.

En el display: PTA

¡No se debe efectuar ninguna preselección de tara manualmente con la tecla TARE!

7.2.8 Función AUTO TARE activa

Función AUTO TARE inactiva

La activación de la función Auto Tare sirve para estabilizar el punto cero de la balanza.

Pequeñas modificaciones de peso en la zona del punto cero son taradas automáticamente, es decir la indicación en el display permanece en cero.

7.2.9 VELOCIDAD / filtro

Es posible adaptar la balanza en etapas de 1 a 5 al lugar de emplazamiento.

Etapa 1 = buenas condiciones de emplazamiento, **indicación rápida / poca filtro** (p. ej. para dosificar)

Etapa 5 = malas condiciones de emplazamiento, **indicación lenta / alta filtro** (entorno inquieto)

Los pesajes de dosificación, p. ej., requieren una velocidad de indicación más alta, lo cual se puede ajustar dentro del programa MODE bajo el punto „Fast“.

7.2.10 Función AUTO OFF activa

Función AUTO OFF inactiva

La función **Auto Off** apaga la balanza automáticamente después de haber estado inactiva durante aprox. 60 segundos.

7.2.11 FACTOR VARIABLE

El valor de medición en **g** es multiplicado automáticamente con el **factor variable** ajustado y el resultado es indicado en el display (conjuntamente con la unidad *).

Ejemplo:

Una hoja con dimensiones de 10 x 10cm pesa 0,6g - hay que determinar el peso /1m², por esto hay que poner el factor a 100. Así el valor indicado es de 0,6g x 100 = 60,0* es decir 60,0gr/m².


7.2.12 PRESELECCION

Selección de UNIT

Todas las unidades seleccionadas con YES bajo el punto **Preselect Units** son ofrecidas para la conmutación de unidades por medio de la tecla **UNIT** dentro del modo de pesaje.

Recomendación: Sólo preseleccionar las unidades realmente requeridas.

Con cada pulsación de la tecla **UNIT** se conmuta a la siguiente unidad preseleccionada (las unidades preseleccionadas mediante la función **Preselect Units**).

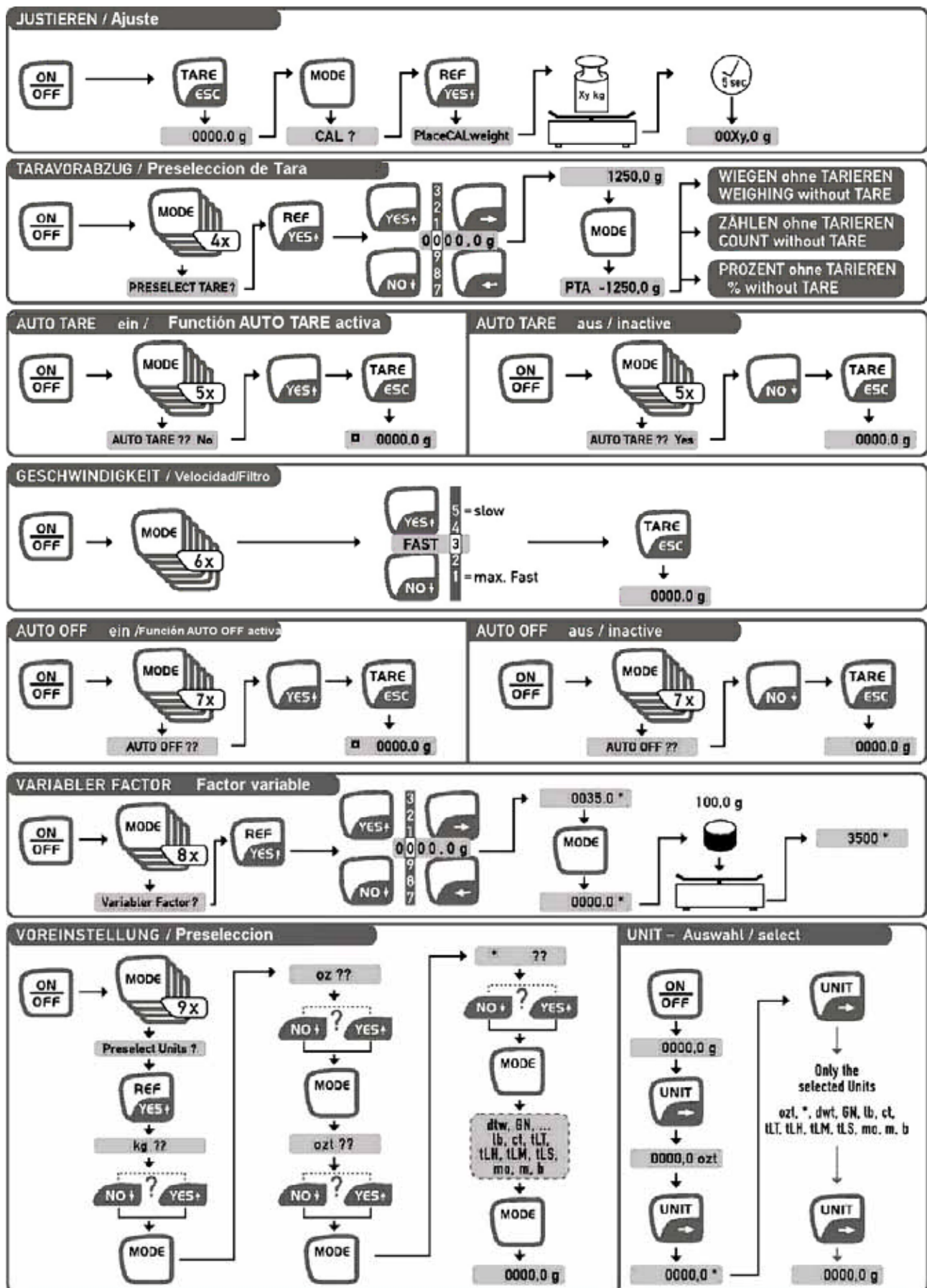

7.2.13 Iluminación del fondo de la indicación

Con balanza encendida e indicación puesta en cero, seleccionar el punto de menú „Backlight“ al apretar la tecla „MODE“. Confirmar mediante la tecla „YES“ para encender la iluminación del fondo permanente. Apagar la iluminación de fondo al apretar la tecla „NO“.


Si la iluminación de fondo de la indicación tiene que apagarse después de cierto tiempo predefinido (para ahorrar la batería), se puede seleccionar el punto de menú „Backlight auto“ al apretar la tecla „MODE“ y confirmar con la tecla „YES“. Esta entonces se apagará 10 segundos después de haber alcanzado un valor de pesaje estable.

7.3 Interface de datos RS 232 C

Datos técnicos

- 8-bit ASCII Code
- 1 bit Start, 8 bits datos, 1 bit Stop, y ningún bit de paridad
- Capacidad en baudios seleccionable 2400, 4800 y 9600 (capacidad instalada) y 19200
- Sub-D clavija 9polos necesario
- La utilización correcta de una interface esta segura solo con un cable de interface KERN (max. 2m).

Descripción del casquillo

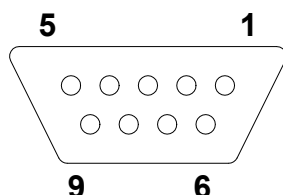

Pin 2: Transmit data

Pin 3: Receive data

Pin 5: Signal ground

Capacidad en baudios

La transmisión de la capacidad en baudios al valor de medición se regula mediante la tecla MODE. En el siguiente ejemplo se regula la capacidad en baudios a 4800 baudios:

Regulación de la capacidad en baudios	Indicador
1. Ir pulsando la tecla MODE hasta que aparezca la indicación "PRINTER? "	PRINTER?
2. Pulsar la tecla YES	2400 baudios
3. Ir pulsando la tecla MODE hasta que aparezca la capacidad en baudios deseada (por ejemplo 4800 baudios).	4800 baudios
4. Pulsar la tecla YES para 4800 baudios, la indicación X confirma la nueva instalación.	4800 baudios X
5. Ir pulsando la tecla MODE hasta que la balanza vuelva a indicar en gramos o bien pulsar la tecla TARE.	0,0 g

7.4 Distribución de datos a través del Interface RS 232 C

Generalidades

La condición previa para realizar una transferencia de datos entre la balanza y el aparato periférico (por ejemplo impresora, PC ...) es que ambos aparatos deben funcionar con los mismos parámetros receptores (por ejemplo Capacidad en baudios, paridad...).

7.4.1 Hay 4 clases de distribución de datos a través del RS 232 C

Distribución de datos mediante de la tecla PRINT

El proceso de impresión puede ser conectado mediante la tecla PRINT. Aquí las instalaciones AUTOPRINT y AUTOPRINT PC deben permanecer desconectadas.

AUTOPRINT (Distribución de datos después del apoyo del peso)

La instalación AUTOPRINT se encuentra localizada en la senda PRINTER y aquí puede ser conectada o desconectada. AUTOPRINT está activado, una vez descargada la balanza y colocada la carga, hay que esperar el punto de parada del valor de pasaje actual, este será enviado a través del interface.

AUTOPRINT PC (Distribución continua de datos)

La regulación AUTOPRINT PC está en el rutina PRINTER y hallé se puede seleccionar o deseleccionar. Cuando AUTOPRINT PC está activado los valores actuales de pesaje serán enviados continuamente vía el interface RS 232.

Distribución de datos por telecomando

Las órdenes del telecomando se transfieren a la balanza en código ASCII y permiten obtener de la misma las siguientes funciones:

- t Tarar.
- w Un valor de pesaje (también inestable) es transmitido en serie desde la balanza a través del interface.
- s Un valor de pesaje estable es transmitido en serie desde la balanza a través del interface.

Tras la recepción de los símbolos W o s, la balanza transmite sin pausas de impresión entre los símbolos.

7.4.2 Descripción del transferidor de datos

Cada transmisión de datos presenta la siguiente disposición

Sin numerador:

Bit-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		B	B	B	B	B	B	B	B	0		0	B	g	B	B	CR	LF
	B*																	

B*:	=	Blank o en Autotara ámbito del punto cero.
B, 0, ;, g:	=	Blank o valor de pesaje con unidad, según la carga de la balanza.
CR:	=	Carriage Return
LF:	=	Line Feed

Con numerador:

Bit.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	N	N	N	B*	B	B	B	B	B	B	B	0		0	B	G	B	B	CR	LF
N:	= Numerador																			

7.4.3 Numerador

El numerador está bajo el punto „Printer“ en el menú y puede ser activado o desactivado. El numerador sube un punto durante la salida de datos a través de la tecla „Print“.

7.5 Impresora para el valor registrado

Una impresora para el valor registrado puede ser instalada en todas las balanzas con salida de datos RS 232 C. La impresión muestra el peso en gramos. En el programa de contaje se imprimen el número de piezas o la indicación del peso. En el programa de tanto por cien se imprime el porcentaje de las piezas o la indicación del peso.

La impresión se efectúa mediante la confirmación de la tecla PRINT.

Con el numerador cada impresión puede ser numerada de forma consecutiva.

El numerador vuelve a la posición (000) cuando se desconecta la balanza o bien mediante la utilización de la función CLEAR.

7.6 Pesaje sumergido

Los objetos debido a su tamaño o su forma que no se puedan colocar sobre el platillo de pesaje de la balanza, se pueden pesar mediante la ayuda de pesaje sumergido.

Proceda del modo siguiente:

- Apagar la balanza
- Darle vuelta a la balanza, tenga encuenta ,que el platillo no esté cargado .
- Abrir la tapa de cierre que se encuentra en la parte de abajo de la balanza.
- Enganchar el gancho para pesaje sumergido.
- Colocar la balanza encima de una abertura.
- Enganchar el material que se desee pesar en el gancho y efectuar el pesaje.



PRECAUCIÓN

Preste atención necesariamente a que los ganchos utilizados para pesaje sumergido sean suficiente sólidos y que sustenten correctamente el producto a pesar (peligro de rotura).

Asegurar siempre de que bajo la carga suspendida no permanezcan seres vivos o materiales que pudieran sufrir daños.



NOTE

Después de finalizar el pesaje sumergido, deberá cerrar necesariamente la abertura del piso de la balanza (protección contra el polvo).

8 Mantenimiento, conservación, eliminación

8.1 Limpieza

Antes de la limpieza hay que separar el aparato de la red eléctrica.

No utilice detergentes agresivos (disolventes o cosas por el estilo), sino solamente un paño humedecido con una lejía de jabón suave. Preste atención de que ningún líquido entre al interior del aparato. Seque las superficies con un paño seco, suave y limpio.

Elimine restos de pruebas o polvos con cuidado utilizando un pincel o una aspiradora de mano.

Eliminar de inmediato material de pesaje derramado.

8.2 Mantenimiento, conservación

Sólo técnicos de servicio capacitados y autorizados por la empresa KERN deben abrir el aparato.

Separar el aparato de la red eléctrica antes de abrirlo.

8.3 Eliminación

El explotador debe eliminar el embalaje y/o la balanza conforme a las leyes nacionales o regionales vigentes en el lugar de uso del aparato.

9 Pequeño servicio de auxilio

En caso de avería en la secuencia de programa, se tiene que apagar la balanza y desconectarla de la red por unos segundos. Esto significa que se tiene que volver a efectuar el proceso de pesaje desde el principio.

Ayuda:

Avería

Posible causa

La indicación de peso no aparece.

- *La balanza no está encendida.*
- *La conexión entre balanza y red eléctrica está interrumpida (cable de la red no enchufado o defectuoso).*
- *Ha habido un apagón.*

El valor del peso indicado cambia continuamente.

- *Corriente de aire / circulación de aire*
- *Vibraciones de la mesa / del suelo*
- *La placa de pesaje tiene contacto con cuerpos ajenos.*
- *Campos electromagnéticos / carga electrostática (elegir otro lugar de emplazamiento; si es posible, desconectar el aparato causante de las perturbaciones)*

El resultado del pesaje obviamente es falso.

- *La indicación de la balanza no se encuentra en el punto cero.*
- *El ajuste ya no es correcto.*
- *Existen fuertes oscilaciones de temperatura.*
- *Campos electromagnéticos / carga electrostática (elegir otro lugar de emplazamiento; si es posible, desconectar el aparato causante de las perturbaciones)*

En caso de que aparezcan otros avisos de error, desconectar la balanza y volverla a conectar. Si el aviso de error no desaparece, informar al fabricante de la balanza.

10 Declaración de conformidad



KERN & Sohn GmbH

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: info@kern-sohn.de

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0

Fax: 0049-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.de

Konformitätserklärung

EC-Konformitätserklärung

EC- Déclaration de conformité

EC-Dichiarazione di conformità

EC- Declaração de conformidade

EC-Deklaracja zgodności

EC-Declaration of -Conformity

EC-Declaración de Conformidad

EC-Conformiteitverklaring

EC- Prohlášení o shode

ЕС-Заявление о соответствии

D	Konformitäts- erklärung	Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
GB	Declaration of conformity	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
CZ	Prohlášení o shode	Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými normami.
E	Declaración de conformidad	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
F	Déclaration de conformité	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
I	Dichiarazione di conformità	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
NL	Conformiteit- verklaring	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
P	Declaração de conformidade	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta declaração, corresponde às normas seguintes.
PL	Deklaracja zgodności	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
RUS	Заявление о соответствии	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, соответствует перечисленным ниже нормам.

Electronic Balance: KERN 572, FCB, FKB, DS, KB, PCB

Mark applied	EU Directive	Standards
	89/336/EEC EMC	EN 61326: 1997+ A1:1998+ A2:2001 + A3:2003 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Date: 07.01.2008

Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149



KERN & Sohn GmbH

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: info@kern-sohn.de

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0

Fax: 0049-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.de

Konformitätserklärung

EC-Konformitätserklärung
EC- Déclaration de conformité
EC-Dichiarazione di conformità
EC- Declaração de conformidade
EC-Deklaracja zgodności

EC-Declaration of -Conformity
EC-Declaración de Conformidad
EC-Conformiteitverklaring
EC- Prohlášení o shode
EC-Заявление о соответствии

D	Konformitäts- erklärung	Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
GB	Declaration of conformity	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
CZ	Prohlášení o shode	Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými normami.
E	Declaración de conformidad	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
F	Déclaration de conformité	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
I	Dichiarazione di conformità	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
NL	Conformiteit- verklaring	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
P	Declaração de conformidade	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta declaração, corresponde às normas seguintes.
PL	Deklaracja zgodności	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
RUS	Заявление о соответствии	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, соответствует перечисленным ниже нормам.

Electronic Balance: KERN 573

Mark applied	EU Directive	Standards
CE	89/336EEC EMC	EN45501 EN55022

Date: 03.06.2004

Signature: _____

Gottl. KERN & Sohn GmbH
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149

Konformitätserklärung

EC-Konformitätserklärung
EC- Déclaration de conformité
EC-Dichiarazione di conformità
EC- Declaração de conformidade
EC-Deklaracja zgodności

EC-Declaration of -Conformity
EC-Declaración de Conformidad
EC-Conformiteitverklaring
EC- Prohlášení o shode
ЕС-Заявление о соответствии

D	Konformitäts- erklärung	Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt. Diese Erklärung gilt nur in Verbindung mit der Konformitätsbescheinigung einer benannten Stelle.
GB	Declaration of conformity	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards. This declaration is only valid with the certificate of conformity by a notified body.
CZ	Prohlášení o shode	Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými normami. Toto prohlášení platí pouze ve spojitosti s deklarací o souladu uvedeného pracoviště se směrnicemi EU.
E	Declaración de conformidad	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes. Esta declaración solo será válida acompañada del certificado de conformidad de una institución renombrada.
F	Déclaration de conformité	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. Cette déclaration est valide seulement avec un certificat de conformité d'un organisme notifié.
I	Dichiarazione di conformità	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate. Questa dichiarazione sarà valida solo se accompagnata dal certificato di conformità della parte nominale.
NL	Conformiteit- verklaring	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt. Deze verklaring geldt uitsluitend in verbanding met het certificaat van overeenstemming vanwege een daarmee belaste instantie.
P	Declaração de conformidade	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta declaração, corresponde às normas seguintes. Esta declaração vale só em combinação com um certificado de conformidade duma instituição nomeada.
PL	Deklaracja zgodności	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami. Niniejsze oświadczenie obowiązuje wyłącznie w połączeniu z oświadczeniem o zgodności danego miejsca.
RUS	Заявление о соответствии	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, соответствует перечисленным ниже нормам. Эта декларация действует совместно с удостоверением соответствия названной лаборатории.

Electronic Balance: KERN 573

EU Directive	Standards	EC-type-approval certificate no.	Issued by
90/384/EEC	EN45501	D04-09-019	PTB

Date: 03.06.2004

Signature: _____



Gottl. KERN & Sohn GmbH
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149